


HandCut

Aiguille manuelle tru-cut avec système à guillotine pour la biopsie des tissus mous

L'aiguille HandCut est un dispositif jetable pour la biopsie de tissus mous et fibreux dont le prélèvement nécessite une excision. L'aiguillage de type «Menghini» de la canule permet de couper et de prélever des échantillons. Le stylet est doté d'un triple embout ultra acéré pour pénétrer facilement dans les tissus fibreux également et est équipé d'une encoche à échantillonnage de 20 mm pour le prélèvement.

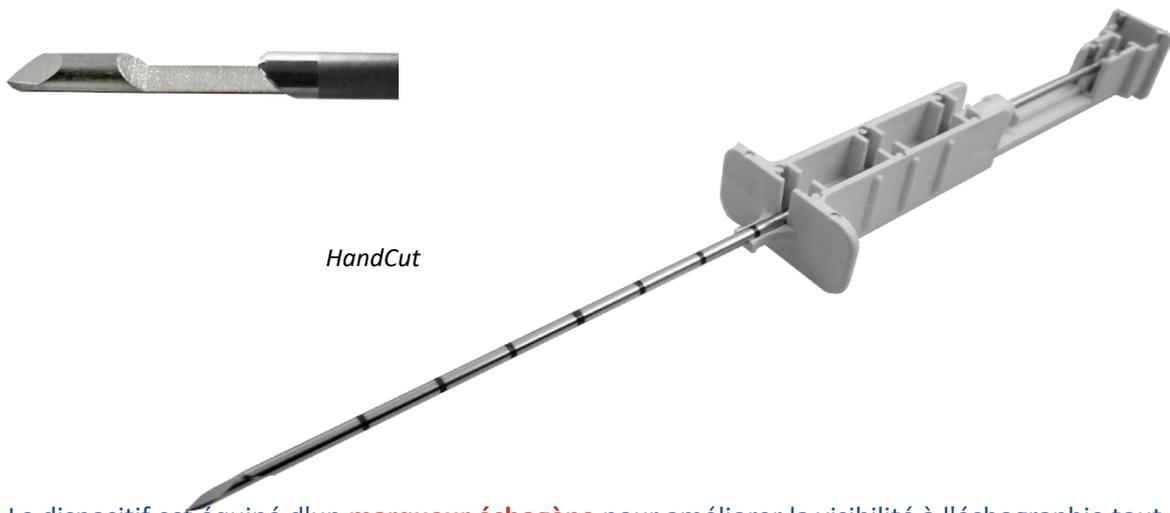

HandCut

- Le dispositif est équipé d'un **marqueur échogène** pour améliorer la visibilité à l'échographie tout en évitant de propager les cellules pendant la biopsie
- L'aiguille est dotée de la **technologie luer lock** qui garantit une fixation sécurisée à la seringue pour l'aspiration cytologique
- Le dispositif est muni d'un **limitateur de profondeur** pour prélever des échantillons de 10 mm de longueur

Informations pour la commande:

Code	Gauge	Diamètre mm	Longueur
PM14114	14 G	2,10	114 mm
PM1415	14 G	2,10	150 mm
Conditionnement: 10 unités			

Si vous souhaitez d'autres tailles, merci de contacter notre spécialiste en produits